WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM

Internationales Büro

INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

WO 90/05181 (51) Internationale Patentklassifikation 5: (11) Internationale Veröffentlichungsnummer: A1 (43) Internationales C12N 9/02 17. Mai 1990 (17.05.90) Veröffentlichungsdatum:

PCT/AT89/00099 (21) Internationales Aktenzeichen:

(22) Internationales Anmeldedatum:

6. November 1989 (06.11.89)

7. November 1988 (07.11.88) AT

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): CL-PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT [AT/AT]; St. Peter Straße 25, A-4021 Linz (AT).

(72) Erfinder; und
(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): JUNGBAUER, Alois [AT/AT]; Skraupstr. 24/36/19, A-1210 Wien (AT). UHL, Karola [AT/AT]; Lienfeldergasse 44/11, A-1160 Wien (AT). SCHÖNHOFER, Wolfgang [AT/AT]; Teichgasse 1/2/21, A-1160 Wien (AT). STEINDL, Franz [AT/AT]; Koppstraße 69/3/23, A-1160 Wien (AT). SKI-AS, Marlies [AT/AT]: Dempschergasse 5/14 A-1180 AS, Marlies [AT/AT]; Dempschergasse 5/14, A-1180 Wien (AT).

(74) Anwälte: ITZE, Peter usw.; Amerlingstraße 8, A-1061 Wien (AT).

(81) Bestimmungsstaaten: AT (europäisches Patent), BE (europäisches Patent), CH (europäisches Patent), DE (europäisches Patent), DK, FI, FR (europäisches Patent), GB (europäisches Patent), HU, IT (europäisches Patent), JP, KR, LU (europäisches Patent), NL (europäisches Patent), NO, SE (europäisches Patent), SU, US.

Veröffentlicht

Mit internationalem Recherchenbericht.

(54) Title: PURIFICATION OF Cu/Zn SUPEROXIDEDISMUTASE

(54) Bezeichnung: REINIGUNG VON Cu/Zn-SUPEROXIDDISMUTASE

(57) Abstract

(30) Prioritätsdaten:

A 2734/88

In a process for isolating and purifying Cu/Zn superoxidedismutase (Cu/Zn-SOD), the foreign proteins are removed from the Cu/Zn-SOD by hydrophobic interaction chromatography (HIC), if necessary after suitable preliminary purification. The product obtained can be readily processed.

(57) Zusammenfassung

Bei einem Verfahren zur Isolierung und Reinigung von Cu/Zn-Superoxiddismutase (Cu/Zn-SOD) wird zwecks Erzielung eines leicht weiterverarbeitbaren Präparates, gegebenenfalls nach entsprechender Vorreinigung, die Cu/Zn-SOD durch Hydrophobic Interaction Chromatographie (HIC) von Fremdproteinen getrennt.

LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Code, die zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

AT AU	Österreich Australien	es Fi	Spanica Finaland	MEL MR	Mali Mauritanien
BB	Barbados	FR	Frakreich	MW	Malewi
BE	Belgien	GA	Gabon	NL	Niederlande
BF	Burkina Famo	GB	Vereinistes Könisreich	NO	Norweaca
BG	Bulgarien	HU	Ungarn	RO	Rumanien
BJ	Benin	IT	Italien	SD	Sudan
BR	Brasilien	JP	Japan	SE	Schweden
CA	Kanada	KP	Demokratische Volksrepublik Korea	SN	Senegal
CF	Zentrale Afrikanische Republik	KR	Republik Korea	SU	Soviet Union
CG	Kongo	Ц	Liechtenstein	TD	Techad
CH	Schweiz	LX	Sri Lanka	TG	Togo
CM	Kamerun	ш	Luxmburg	US	Vereinigte Staaten von Amerika
DE	Deutschland, Bundesrepublik	MC	Monaco		_
DK	Dēnemark	MG	Madaesskar		

REINIGUNG VON Cu/Zn-SUPEROXIDDISMUTASE

EINLEITUNG

5

1.1. Die biochemischen Eigenschaften der Cu/Zn-Superoxiddismutase

Die Cu/Zn Superoxiddismutase, im folgenden Cu/Zn-SOD 10 genannt, (E.C. 1.15.1.1) ist ein Metalloprotein; das auch unter dem Namen Erythrocuprein, Haemocuprein und Cytocuprein bekannt ist. Die humane Cu/Zn Superoxiddismutase besteht aus 2 Untereinheiten, die nicht kovalent miteinander verbunden sind. Die natürlich vorkommende humane SOD 15 ist am N-Terminus acetyliert und besteht aus 153 Aminosäuren. Pro Molekül Cu/Zn-SOD sind in der Regel 2 Kupfer Zinkionen gebunden. Die Cu/Zn-SOD besitzt eine und charakteristische Absorptionsmaximum bei 265 nm. Entfernung des Kupfers und Zinks durch Chelatbildner ver-20 schwindet dieses Absorptionsmaximum. Die Superoxiddismutase ist ein thermostabiles und sehr gut wasserlösliches Enzym. Eine gewisse Widerstandsfähigkeit gegenüber proteolytischen Abbau wird ihr auch zugeschrieben. Bei höheren Temperaturen (82 °C und 100 °C) entstehen verschiedene Konformationen, 25 die calorimetrisch und durch Bindunsstudien festgestellt Eigenschaft wird auch in HPLC wurden. Diese Elektrophorese beobachtet (1).

30 1.2. Biologische Bedeutung der Cu/Zn-Superoxiddismutase

Üblicher Weise werden rote Blutkörperchen als Ausgangsmaterial für die Gewinnung der Cu/Zn-Superoxiddismutase herangezogen. Die biologische Bedeutung der Cu/Zn-SOD liegt im Abfangen von freien Superoxidradikalen, die bei verschiedensten Reaktionen im Organismus frei gesetzt werden.

WO 90/05181 2 . PCT/AT89/00099

Aus diesem Grund werden der Cu/Zn-SOD auch antiinflammatorische Eigenschaften zugeschrieben (9). Die bovine Cu/Zn-SOD wird bereits zur Behandlung von Osteoarthritis verwendet. Ebenso dürfte SOD eine Verstärkerwirkung für plasminogen-aktivierende Enzyme bei der Reperfusion besitzen (10). Weiters scheint SOD die Lagerungsfähigkeit von den nach der Explantation zum Zwecke einer späteren Transplantation zu stabilisieren (11).

10

1.3. Reinigungsverfahren für Erythrozyten SOD und SOD tierischem Gewebe und Zellkultur

Die konventionellen Reinigungsverfahren für SOD beruhen

15 auf einer Lyse der Erythrozyten, meist eine Osmolyse und
einer Extraktion der SOD mit Chloroform und Ethanol. Diese
Prozedur wird auch Tsuchihaskiprozedur (M. Tsuchihaski,
Biochem. Zeitschrift, 140, 65-72,1923) genannt. Dieser
Rohextrakt wird dann chromatographisch mit Ionentauscher20 chromatographie weiter gereinigt.

Bei Erythrozytenkonzentraten als Ausgangsmaterial kann anstatt der Extraktion eine Hitzepräzipitation eingesetzt werden, um Hämoglobin zu entfernen.

Diese Methode (A. Gärtner et al. Biochem.J.1984; 25 221, 549-551) eignet sich, weil humane Erythrozyten-SOD hitzestabil ist. Eine Dialyse nach der Lyse Erythrozyten wie bei Gärtner et.al. beschrieben, ist nicht notwendig. Das Erythrozytenkonzentrat wird einem Gefriertauzyklus unterworfen und durch Zugabe von destilliertem lysiert. Das Lysat wird durch Zugabe von 80 °C 30 Wasser heißem Wasser auf 70°C erhitzt und eine Stunde heißgehalten und danach rasch auf Zimmertemperatur abgekühlt. Präzipitat wird durch Zentrifugation entfernt. Wenn bei ca. 15 000 g zentrifugiert wird, entfällt ein zusätzlicher 35 Filtrationsschritt, der für eine anschließende Anionentauscherchromatographie notwendig wäre. Die im Überstand zurückbleibende Cu/Zn SOD wird weiterverarbeitet.

1.4. Rekombinante Superoxiddismutase

5

Die Cu/Zn-SOD wurde in einer Reihe von Wirtszellen wie E.Coli, Hefe und tierischen Zellen kloniert (1-5). Je nach Verwendung von verschiedenen Wirtszellen wird ein acetyliertes oder nicht acetyliertes Protein exprimiert.

für E.coli und Hefe beschriebenen Systeme scheiden 10 Die das Enzym nicht in das Kulturmedium aus. Bis zu 60 % des gesamten synthetisierten Proteins besteht aus SOD. Die tierischen Zellen scheiden die rekombinante humane Cu/Zn-SOD (rh-SOD) ins Kulturmedium aus.

15

1.5. Reinigungsverfahren für rekombinante SOD

häufig beschriebener Reinigungsschritt Ein ist die Chromatographie mit DEAE-Sephacel oder DEAE-Cellu-20 losen. Das Homogenat wird geklärt und durch Ammonsulfatfällung vorgereinigt. Nach Bedarf werden noch weitere Schritte zur Entfernung von DNA bzw. Pyrogenen integriert. Hartmann et.al. (2) reinigen den dialysierten Ammonsulfatfällungsüberstand mit einer Anionentauscherchro-25 matographie (DEAE-Sephacel). Um die gewünschte Reinheit zu erhalten, wird das Eluat rechromatographiert. Fraktionen werden mittels Ultrafiltration aufkonzen-triert und mittels Gelfiltration entsalzt. Die Gradientenelution bewirkt, daß ein homogenes Material erhalten

30 wird.

Auch die Immunaffinitätschromatographie mit monoklonalen Anti-human-SOD-Antikörpern wird zur Reinigung rekombinanter SOD herangezogen. Ebenso eignet sich die Affinitätschromatographie mit Heparin-Sepharose zur Reinigung von 35 rekombinanter SOD (3). Vom Prinzip her dürften diese Methoden auch zur Reinigung der natürlich vorkommenden SOD geeignet sein.

WO 90/05181 4 PCT/AT89/00099

1.6. Testsysteme für SOD

Die Testsysteme zum Nachweis der enzymatischen Aktivität von SOD beruhen auf dem Prinzip einer Negativbestimmung. Zuerst werden Superoxid Radikale generiert. Die Radikalgenerierung kann enzymatisch, chemisch oder mit UV-Licht erfolgen. Die SOD fängt einen Teil der freien Radikale ab.

Die Verbleibenden werden durch einen Indikatorradikalfänger abgefangen, dessen Reaktionsprodukte werden colorimetrisch, photometrisch, polarographisch oder mittels Luminscenzmessung ausgewertet. Die Bestimmung der SOD aus Rohextrakten von Mikroorganismen oder Geweben ist sehr störanfällig. Der immunologische Nachweis auf ELISA Basis

funktioniert auch in Rohextrakten von Mikroorganismen.

BESCHREIBUNG DER REINIGUNGSVERFAHREN

20 Die eigentliche Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren zur Isolierung und Reinigung von Cu/Zn-SOD.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zu Grunde, daß SOD gewonnen aus tierischen Geweben, Flüssigkeiten, transformierten Mikroorganismen oder transformierten tierischen

25 Zellen zu einem von Begleitproteinen und anderen Verunreinigung zubefreien.

Erfindungsgemäß wird, gegebenenfalls nach entsprechender Vorreinigung, die Cu/Zn-SOD durch Hydrophobic Interaction Chromatographie (HIC) von Fremdproteinen getrennt. Dadurch

- 30 wird ein SOD-Produkt erhalten, das leicht zu einem Enzympräparat verarbeitet werden kann, das dann Therapeutikum einsetzbar ist. Bevorzugt kann die durch HIC Fremdproteinen getrennte Cu/Zn-SOD mittels Metallchelatchromatographie oder Ionentauscherchromato-
- 35 graphie nachgereinigt werden, wodurch das Präparat besonders rein erhalten wird und direkt als Therapeutikum einsetzbar ist.

In dieser gegenständlichen Erfindung erfüllt die HIC in idealer Weise die Voraussetzung für einen technischen Prozeß, der zur Produktion von Biologika zum Einsatz in der human Medizin geeignet ist. Neben der Reinigung und Entfernung von Fremdproteinen werden auch Pyrogene und DNA stark abgereichert.

Ammonsulfatkonzentrationen die Cu/Zn-SOD in hohen löslich ist, erfüllt sie eine wichtige Voraussetzung für die HIC. Pyrogene, als fiebererregende Substanzen dürfen 10 nur in Spuren in Pharmazeutika , die parental verabreicht werden, vorhanden sein. Der Wirtsstamm für die rekombinante SOD, E.coli produziert von sich aus Lipopolysacchride, die als Hauptvertreter der Pyrogene anzusehen sind. Hartmann in ihrer Reinigungsprozedur müssen zusätzlichen Schritt zur Entfernung von Pyrogenen und DNA durchführen.

In der gegenständlichen Erfindung ist jedoch eine starke Pyrogenreduktion durch die HIC selbst gewährleistet.

- Ebenso wird die DNA entfernt, die bei Verwendung von gentechnisch erzeugten Wirksubstanz einen bestimmten Schwellenwert nicht überschreiten darf. Aus diesen Gründen erfüllt die HIC in der gegenständlichen Erfindung in idealer Weise die Voraussetzung für die Produktion von SOD, die parenteral verabreicht wird.
- 25 Die von Arai et. al. (15) beschriebene immunaffinitätschromatographische Reinigung hat zwar den Vorteil, daß sie sehr spezifisch und gleichzeitig universell einsetzbar der Unstabilität des IqG als Liganden Abbau ist proteolytischen eine nicht unerhebliche 30 Problematik bei der Reinigung von pharmazeutischen Wirksubstanzen gelegen. Vorreinigungsschritte, die chromatographisches oder ähnlich effektives Verfahren beinhalten, müssen bei der Immunaffinitätschromatographie eingebaut sein. Die HIC benötigt keine unbedingt 35 chromatographischen Vorreinigungsschritte zusätzlich noch sehr leicht mit Natronlauge entpyro-Durch die Natronlaugenbehandlung genisiert werden.

HIC werden auch unspezifisch gebundene Proteine

und

nicht proteinogene Substanzen entfernt.

WO 90/05181 6 PCT/AT89/00099

2.1. Beschreibung der Vorreinigungsschritte

Je nach Ausgangsmaterial (Bakterien, Hefen, Erythrozyten oder tierischen Zellen) müssen verschiedene Extraktionsschritte bzw. Vorreinigungsschritte dem eigentlichen Reinigungsverfahren vorgeschaltet werden.

Das Aussalzen, insbesondere die Ammonsulfatfällung ist ein effektiver Vorreinigungsschritt für die rh-SOD 10 Bakterien oder Hefen als Ausgangsmaterial.

- Die Mikroorganismenbrühe wird homogenisiert. Es eignen dazu sowohl enzymatische Methoden (Lysozym) als auch mechanische, (Hochdruckhomogenisatoren) oder physikalische (Ultraschall) Methoden. Um die Zentrifugierbarkeit des
- 15 viskosen Homogenates zu verbessern, können dem Extraktionspuffer Nukleasen zugesetzt werden. Dadurch wird die DNA in kleinere Bruchstücke verdaut und somit sinkt die Viskosität. Das Homogenisat wird mit Hilfe von Zentrifugation oder Mikrofiltration geklärt.
- 20 Das geklärte Homogenat wird mit Ammonsulfat oder einem entsprechenden Salz versetzt, sodaß eine Endkonzentration zwischen 40 und 60 % erhalten wird. Die Cu/Zn-SOD bleibt im Überstand, das Präzipitat wird neuerlich durch Zentrifugation oder Mikrofiltration abgetrennt.

25

2.2. Hydrophobic Interaction Chromatographie

Die Hydrophobic Interaction Chromatographie wurde von W. Melander (7) und Ochoa (8) in Reviews beschrieben. Diese Art der Chromatographie basiert auf der spezifischen Wechselwirkung der hydrophoben Zentren in den Proteinen mit einem hydrophoben Liganden, (wie Phenyl, Octyl, Butylliganden usw.) in Gegenwart hoher Salzkonzentrationen.

35 Diese hohen Salzkonzentrationen bewirken durch Wasserentzug und Abblocken hydrophiler Zentren im Protein die

ERSATZBLATT

spezifische Weschselwirkung.

Die Hydrophobic Interaction Chromatographie (HIC) über Phenyl, Butyl, Octylsäulen etc. ist nur sinnvoll in Kombination mit einer Salzfällung einzusetzen. Der geklärte Überstand aus der Ammonsulfatfällung bzw. Salzfällung wird auf die HIC-Säule aufgetragen, die vorher mit einer entsprechenden Salzlösung äquilibriert wurde. Die SOD wird mit Salzpuffer niedriger Salzkonzentration eluiert. Aufgrund der hohen Salzlöslichkeit der SOD ist die Hydrophobic Interactionchromatographie besonders gut für das gegenständliche Reinigungsproblem geeignet. Durch die hohe Ammonsulfatkonzentration können Verunreinigungen in

diesem Vorreinigunsschritt entfernt werden.

15 2.3. Nachweis der Cu/Zn-SOD

Die SOD-Bestimmung wurde entweder immunologisch chromatographisch oder mit einem Aktivitätstest durchgeführt.

20 Immunologischer SOD-Nachweis mit ELISA:
Es wurde Prozedur nach T.Porstmann (6) verwendet. Der
Test basiert auf Verwendung zweier SOD-spezifischer
monoklonaler Antikörper. Einer davon ist mit Meerrettichperoxidase gekoppelt. Die Auswertung erfolgte in
25 einem Mehrkanalphotometer für Mikrotiterplatten (Easy
Reader der Firma SLT).

Aktivitätstest:

Es wurde ein Testsystem gewählt, mit dem Xanthin/Xanthin 30 oxidase als Radikalgenerator und Nitrobluetetradolium als Indikatorradikalfänger verwendet wird.

Auch dieser Test wurde in Mikrotiterplatten durchgeführt. 100 μ l Reagenzlösung und 50 μ l Probe bzw. Blindwert werden zusammenpipettiert und photometrisch bei 600 nm ausgewertet. Danach werden 50 μ l Xanthinoxidase zupipettiert und 20 min. unter leichtem Schütteln inkubiert und wieder photometrisch bei 600 nm ausgewertet. Das farblose Nitrotetrazolium blau (NBT) wird die durch O2-Radikale,

WO 90/05181 8 . PCT/AT89/00099

die durch Xanthinoxidase entstehen zu einer blauen Farbe aufoxidiert. In Gegenwart von SOD bleibt die Lösung ungefärbt. Als SOD-Standard wurde Peroxinorm der Fa. Grünenthal verwendet.

5

Puffer für den Aktivitätstest

- Reagenzlösung I besteht aus
 50 mMolar Kaliumphosphatpuffer, 1,25 m Molar
 Diethylentriaminopentaessigsäure Puffer 100 μl
 Puffer werden mit 10 mg Xanthin, 15 mg NBT und ca. 4000
 Einheiten Katalase versetzt
- Xanthinoxidase wird so in einem 50 mM Kaliumphosphat,
 1,25 mM Diethylentriaminopentaessigsäure Puffer gelöst,
 daß 100 ml eine Einheit des Enzyms enthalten

Definition der Einheiten:

20

Katalase: 1 Einheit baut 1,0 uM H₂O₂ pro Minute bei

pH 7,0 und 25 $^{\rm O}$ C ab, wobei die ${\rm H_2O_2}$

Konzentration von 10,3 auf 9,3 uM/ml fällt

Xanthinoxidase: 1 Einheit konvertiert 1,0 uM Xanthin

25 zu Harnsäure pro Minute bei pH 7,5 und

25 °C.

Chromatographische Bestimmung

30

Die SOD wurde auch mit Reversed Phase Chromatographie (RPC) quantifiziert. Es wurde eine C-4 oder C-14 Säule eingesetzt. Mit einem Acetonitrilgradienten (20-60 %) mit 0,1 % TFA wurde eluiert. Als Detektor wurde ein Diodenarray detector der Fa. Hewlett Packard verwendet. Die Methode eignet sich auch zur Quantifizierung von SOD aus Rohextrakten.

3. BEISPIELE

Beispiel I

5 Rekombinanter Mikroorganismenstamm

Ein für humane Cu/ZnSOD kodierendes chemisch synthetisiertes Gen wurde über entsprechende flankierende Sequenzen in die Restriktionsschnittstellen BamH1 und HindIII des Plasmids pEMBL 8 kloniert. Aus dem so amplifizierten Plasmid pEMBL 8-SOD wurde das SOD-Gen mit den Restriktionsenzym ECORI und HindIII herausgeschnitten und das gereinigte Restriktionsfragment in den Vektor pKK 223-3 (Pharmacia) kloniert.

Die AUG flankierenden Regionen des SOD-Gens wurden mittels der in vitro Mutagenese mit einem Oligonucleotid von der Sequenz:

20

so verändert, daß eine hohe Expression von humaner Cu/ZnSOD ermöglicht wurde. (Hallewell et. al.; 1) Das so erhaltene Plasmid pKK223-SOD X 16 wurde in E.Coli JM 105 (Pharmacia) Wirtszellen transformiert und die rekombinanten E.Coli

25 Zellen im Batchverfahren kultiviert. 2 Stunden nach Induktion mit Isopropylthiogalactosid (IPTG) wurde die Biomasse geerntet.

30 Zellernte und Aufschluß

Nach der Induktion mit IPTG wurde die Biomasse durch Zentrifugation abgetrennt. Das Pellet wird im Extraktionspuffer gewaschen und bei -80°C bis zur weiteren Verwendung 35 gelagert. Der Aufschluß wurde enzymatisch mit Lysozym durchgeführt.

WO 90/05181

(Lysozym wurde bei 37 °C mit dem gewaschenen resuspendierten Pellet inkubiert). Um die Viskosität zu erniedrigen wurde das Homogenisat mit DNAse inkubiert. Das geklärte Homogenat wurde so bei 4 °C mit gesättigter Ammonsulfatlösung versetzt, daß eine 60 % Endkonzentration erreicht wurde. Das Präzipitat wird durch Zentrifugation abgetrennt und der Überstand wird weiterverarbeitet. Anstelle von gesättigter Ammonsulfatlösung kann festes Ammonsulfat direkt in das Homogenat eingerührt werden.

4.3. Hydrophobic Interaction Chromatographie (HIC)

15

Durch diesen Schritt können hydrophobe und hydrophile Substanzen getrennt werden. Die rh-SOD bindet an die Säule bei hoher Ionenstärke und kann bei geringer Ionenstärke eluiert werden.

20

AUFSCHLUSS

Da sich die rh-SOD in der E.Coli Zelle befindet, muß die Zelle aufgeschlossen werden. Hier wird eine enzymatische Methode mit Lysozym aus Hühnereiweiß angewendet. Folgende Materialien und Chemikalien wurden verwendet:

- TRIS-Base (Fa. Sigma)
- $30 Cuso_A$

(Dinatrium EDTA; (Fa. Merck)

- ZnCl₂ (Fa. Merck)
 - konz. Mercaptoethanol (Fa. Sigma)
 - PMSF gelöst in Äthanol (Fa. Sigma)
- 35 Lysozym (Fa. Sigma, oder Fa. Serva)
 - Triton x-100 (Fa. Serva)
 - DNASE I (Fa. Sigma)

Zusammensetzung der Lösungen

- Waschpuffer für E.Coli Zellen 100 mM Tris/HCL pH 8,0 versetzt mit 100 mM NaCl und 1 mM EDTA
- Resuspensionspuffer: 20 mM TRIS/HCl pH 8,2
- Aufschlußstammlösung:

10

5

10			
	Volumen		
	für 30 ml	Stammlösung	Endkonzentr.
	E.coli		in E.coli susp.
15	300 µl	500 mM EDTA	5 mM
	150 µl	200 mM CuSO ₄	1 mM
	30 µl	100 mM ZnCl ₂	100 mM
	15 <i>µ</i> l	Mercatoethanol	7 mM
	600 µl	5 % PMSF gelöst in Äthanol	0,1 %
20	600 µl	10 mg/ml Lysozym	0,2 mg/ml
	30 µl	10 mg/ml DNAse I	15 units/ml

Zu 30 ml der Bakteriensuspension kommen die angegebenen 25 Volumen der Stammlösung. Danach wird 5 min bei 40 °C inkubiert. Die Lyse der Zellen erfolgt durch Zugabe von 1,5 ml 10 %iger Triton x-100 Lösung und 5 minütiger Inkubation bei 40 °C. Die lysierten Zellen werden mittels Zentrifugation abgetrennt und der klare Überstand 30 weiterverwendet.

Folgende Materialien und Chemikalien wurden verwendet:

- 35 Phenylsepharose fast flow (Fa. Pharmacia)
 - Ammonsulfat tech. rein
 - TRIS-Base (Fa. Sigma)
 - · HCl 25 %

Die Pufferbereitung erfolgte nach folgender Vorschrift:

- Äquilibrierungspuffer:

60 % $(NH_4)_2SO_4$ in 25 mM TRIS HCI pH 7,5

5 3,0 g TRIS/1000 ml + 351 g $(NH_4)_2SO_4$ mit HCI auf pH stellen

Leitfähigkeit 200 mS/cm

- Elutionspuffer II:
 - 25 mM TRIS/HCl pH 7,5 wird
- 10 (NH₄)₂SO₄ gelöst 25 mM TRIS (auf 160 S/cm Leitfähigkeititriert, Zimmertemperatur
 - Regenerierungspuffer: 25 mM TRIS/HCI pH 7,5 Leitfähigkeit: 1,9 mS/cm

15

35

Die Chromatographie wurde wie folgt durchgeführt:

- Packen der Säule mit 20 % Äthanol
- 20 Äquilibrieren der Säule

Säule wird mit Äquilibrierungspuffer äquilibriert. Aufgrund der hohen Viskosität der Lösungen ist es von Vorteil diesen und alle anderen Lösungen von unten nach oben durch die Säule zu pumpen. Dadurch kann die störende Kanalbildung verhindert werden.

- Auftragen
 Mikrofiltrat der Probe wird aufgetragen
- 30 Auswaschen Nach dem Auftragen wird mit Äquilibrierungspuffer bis zum Erreichen der Basislinie ausgewaschen
 - Elution
 Mit den verschiedenen Elutionspuffern werden die Fraktionen eluiert und peakweise gesammelt.
 - Die SOD wird bei ca. 170 mS/cm eluiert.
 - Mit Reinigungspuffer werden die noch an der Säule haften den Proteine eluiert.

Nach Äquilibrieren kann die gleiche Säule mehrmals

40 wieder verwendet werden.

50 ml Phenyl-Sepharose fast flow der Fa. Pharmacia wurde in eine Säule mit 5 cm₂ Querschnitt gepackt. Das Gel wurde mit einer 60 %igen Ammonsulfatlösung äquilibriert. Der geklärte Überstand aus der Ammonsulfatlösung wurde mit 0,2

geklärte Uberstand aus der Ammonsulfatlösung wurde mit 0,2 um Filter von allen Feinteilen befreit und auf die Phenyl-Sepharose fast flow aufgetragen.

Die Elution erfolgte mit einer Ammonsulfatlösung etwas geringerer Konzentration (ca. 50 % Sättigung) als der des 10 Äquilibrierungspuffer.

Die einzelnen Fraktionen wurden zusätzlich mit reversed Phase chromatographie (RPC) über RRC C14 überprüft. Die Elution erfolgte mit einer Ammonsulfatlösung etwas geringerer Konzentration (ca. 50 % Sättigung) als der des Äquilibrierungs-puffer.

Die Reinigungsergebnisse sind in Tabelle 1 zusammengefaßt. Die SOD-Konzentration wurde mittels ELISA wie von Porstmann et.al. beschrieben, bestimmt.

Die einzelnen Fraktionen wurden zusätzlich mit Reversed 20 Phase Chromatographie (RPC) überprüft.

ں	<pre>Tabelle 1: Zusammenfassung der ten E.Coli Homogenat * n.d.= nicht detekt;</pre>		inigungserge rd mit Pheny bar mit spez	bnisse, Amm Isepharose ifischer E.	onsulfatber fast flow a Coli DNA Pr	Reinigungsergebnisse, Ammonsulfatberstand aus geklr-wird mit Phenylsepharose fast flow aufgetrennt.erbar mit spezifischer E.Coli DNA Probe	klr-
	Stufe	ัด	SOD	Protein	Ausbeute	Endotoxin	DNA
		m)	(mg)	(mg)	(%)	(ng/ml)	
ER		Aktivitt	ELIȘA				
្ត SATZBLA	- E.coli Homogenat	n.d.	39,1	800	100	150.000	
ATT	-Uberstand Ammonsulfat創lung	16,7	17,2	198	42,7	150	
20	- Eluat der Phenyl Superose fast flow	13,7	12,8	34,7	32,7	1 ng.	n.d.

Der in Fig. 1 mit SOD gekennzeichnete Peak wurde mit RPC auf seine Reinheit geprüft und im Vergleich dazu auch der Ammon- sulfatüberstand. Die Proben wurde vor Injektion 5 in die RPC-Säule mit Sephadex G25 Säulen Daraus resultiert eine unterschiedliche Verdünnung der Das Ausgangsmaterial ist doppelt so stark Proben. verdünnt als das Eluat. Die Retentionszeit der SOD wurde mit einem Material der Firma Biotechnology General bestimmt. Die RPC-Chromatogramme 10 (Israel) ungereinigten und der gereinigten SOD sind in Fig. 3 zusammengefaßt. Die entsprechenden Elektropherogramme (Es wurde das Phastsystem der Fa. Pharmacia verwendet. Die Auftrennung wurde laut Anleitung des Herstellers 15 durchgeführt.) sind aus Fig. 3 ersichtlich (Bahn 1 der Molekulargewichtsmarker, 2 Cu/Zn-SOD nach Hartmann 3 der Ammonsulfatüberstnad, 4 HIC gekennzeichnet mit SOD, 5 HIC gekennzeichnet mit Peak 2, 6 die mit Cu Chelatchromatographie gereinigte SOD.), wobei 20 ein homogenes Produkt erhalten werden konnte.

4.4. Metallchelatchromatographie

25 Das Eluat wurde mittel Cu-Chelat-Chromatographie nach Weselake et.al. (13) weitergereinigt. Das erhaltene Protein wurde auch elektrophoretisch charakterisiert (Fig. 3). Es ist absolut pyrogenfrei.

30

BEISPIEL II.

1. Rekombinanter Mikroorganismenstamm

35 Es wurde das in E.Coli eingesetzte Gen für die Verwendung in Hefen umkonstruiert und in Hefestämmen der Gattung Saccharomyces und Pichia eingesetzt.

2. Zellernte und Aufschluß

5

Nach Erreichen stationären Phase wurde der Biomasse durch Zentrifugation abgetrennt. Das Pellet wird im Extraktionspuffer gewaschen und bei -80 °C bis zur weiteren Verwendung gelagert. Die Zellen wurden 10 mit einer Schwingmühle der Fa. Netzsch aufgeschlossen. Das geklärte Homogenat wurde bei 4oC mit gesättigter Ammonsulfatlösung versetzt. (60 % Endkonzentration). Das Präzipitat wurde durch Zentrifugation abgetrennt der Überstand wird weiterverarbeitet.

15

3. Hydrophobic Interaction Chromatographie HIC

Octylsepharose CL-4 B (ca. 50 ml) der Fa. Pharmacia wurde 20 in eine Säule mit 5 ${\rm cm}^2$ Querschnitt gepackt. Das Gel wurde mit 60 % Ammonsulfat äquilibriert. Der Ammonsulfatüberstand wurde auf die Octylsepharose aufgetragen. Elution erfolgte mit 50 % Ethylenglycol. Die Reinigungsergebnisse sind in Tabelle 2 zusammengefaßt. 25 konnte ein enzymatisch aktives und immunologisch Enzym gefunden werden, weil der Quotient aus Aktivitätstest und ELISA im Bereich von 1 (Tabelle 2) liegt. Der Erfolg des Chromatographie-Schrittes ist aus Fig. 4 ersichtlich. Das Ausgangsmaterial und das Eluat aus der 30 HIC wurden durch RPC auf einer C-4 Säule charakterisiert. Da bei 214 nm auch nicht proteingene Verunreinigungen erfaßt werden, zeigt die RPC die spezifische Anreicherung SOD bezogen auf alle vorhandenen Verunreinigungen, der liegt bei weitem höher als die spezifische Anreicherung 35 bezogen auf Protein.

rU	Tabelle 2:		fassung der	Zusammenfassung der Reinigungsergebnisse von rh-SOD aus Saccheromyces-	rgebnisse vo	n rh-sod	aus Sacc	heromyces-
		lerevisia	al. Der Ammo	lerevisial. Der Ammonsulfatberstand aus dem geklrten Hefehomogenat wird	and aus dem	geklrten	Hefehomoge	enat wird
		mit ocyt	:ylsepharose	mit Ocytylsepharose CL-4B weiter aufgetrennt. Die Ausbeute wurde basie	r aufgetren	nt. Die A	lusbeute wr	ırde basie
		rend auf	den Aktivit	rend auf den Aktivittstest kalkuliert.	liert.			
10								
	Stufe		Volumen	SOD		Protein	spez.	Ausbeute
			(m1)	(bw)		шg	Anreich.	(%)
				Aktivitt	ELISA			
15				 		 		f f f f f f f f f f f f f f f f f f f
	- berstand Ammonsulfatfllung	; itfllung	200	46,0	45,0	254	н	100
20	20 - Eluat		8	32,6	34,0	38,0	0,	20.8

ERSATZBLATT

BEISPIEL III

5

Reinigung von Cu/Zn-SOD aus humanen Erythrozyten

Erykonzentratbeutel Die gefrorenen wurden Gefriertauzyklus unterworfen und in gefrorenem Zustand in einem Kesselgepoolt und aufgetaut. Die aufgetauten Erythrozyten wurden ca. 1 h lang gerührt. Erythrozytenkonzentrat wurden mit 70 kg, 80 °C heißem pyrogenfreien Wasser versetzt und auf 70 °C erhitzt. Suspension wurde eine Stunde lang heißgehalten, gerührt und 15 danach innerhalb von 10 min. Zimmertemperatur auf abgekühlt. Das Präzipitat wurde bei 15000 g in einer Röhrenzentrifuge (Padberg, BRD) abgetrennt, und wurde Zentrifugat direkt der Ammonsulfatfällung unterworfen (60 % Endkonzentration).

- Das Präzipitat wurde neuerlich bei 15000 g abzentrifugiert 20 und über ein 0,45 um Filter filtriert. Für die Hydrophobic Interactionchromatographie wurde Phenylsepharose fast flow verwendet. Die Säule wurde mit einem 10 mM Kaliumphosphatpuffer, der mit 2,4 Mol Ammonsulfat pro Liter 25 versetzt wurde (entspricht ca. 60 Sättigung), aquilibriert. Das filtrierte Zentrifugat wurde auf die äquilibrierte Phenylsepharose fast flow aufgetragen, der nicht gebundene Anteil wurde mit Äquilibrierungspuffer ausgewaschen. Die Cu/Zn-SOD wurde 30 einem 10 mM Kaliumphosphatpuffer der mit Mol Ammonsulfat pro Liter versetzt wurde, eluiert. Die Fraktionen die Cu/Zn-SOD enthalten, wurden gepoolt und die SOD-Aktivität und der Proteingehalt wurden anschließend bestimmt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 3 zusammengefaßt.
- Das Ausgangsmaterial und das Eluat von der HIC wurde einer RPC unterworfen. Die Chromatogramme sind in Fig. 5 zusammengefaßt. Auch hier ist eine starke spezifische Anreicherung zu beobachten.

)	Tabelle 3:		nfassung der epharose fast	Reinigungser flow nach Hi	gebnisse, .tze und Amm	Zusammenfassung der Reinigungsergebnisse, Reinigung der Cu/Zn-SOD Phenylsepharose fast flow nach Hitze und Ammonsulfatfllung	Cu/Zn-SOD mit
10	Stufe		Volumen (ml)	SOD (mg)	Protein (mg)	Anreicherung (mg)	g Ausbeute (%)
15	- berstand Ammonsulfatfilung	tflung ,	1000	17,0	1200	Ħ	100
	- Eluat		120	14,3	24	42,5	67,2

 \mathbf{S}

BEISPIEL IV

Reinigung von rh-SOD aus Zellkulturüberstand

5 Ein ähnlicher Expressionsvektor wie er von Tibel et.al. für die Expression von extrazellulärer SOD verwendet wurde, kam auch hier zum Einsatz.

10 Konstruktion des Expressionsvektors

Es wurde ein SV-40 Expressionsvektor, der folgende relevante DNA-Sequenzen enthält, konstruiert:

- 15 SV-40 Sequenz Basenpaar bp 5173 HIND III bis bp 294 (Kpn I), das den Early promotor und den Origin of replication enthält. Weiters wurden die SV-40 Sequenzen bp 2770 (Bcl I) bis bp 2533 (Bam HI) die das Polyadenylierungssignal enthalten kloniert. Weiters wurde ein synthetische
- 20 Polylinker für verschiedene Restriktionsenzyme einschließlich Eco RI, und pBR 322 Sequenzen, die das ß-Lactamase Gen und den Origin of Replication enthalten, verwendet.
- Die gereinigten DNA-Fragmente wurden in einer 25 Mehrstufenprozedur mit Hilfe verschiedener Vektoren zusammengesetzt. Das entsprechende cDNA-Fragment, das die Cu/Zn-SOD kodiert wurde in die entsprechende Schnittstelle des Polylinkers eingesetzt.

30

Expression von Cu/Zn-SOD in CHO-Zellen

Das so konstruierte Plasmid wurde linearisiert und mit pSV 2 NeoDNA in CHO-K1 Zellen kotransfektiert. Die Genticin35 418 (G-418) resistenten Klone wurden in Optimem Medium, das mit 5 % fötalem Kälberserum und G-418 versetzt gezüchtet. Der Überstand wurde zur Isolierung und Reinigung von Cu/Zn-SOD herangezogen.

Reinigung der SOD

5

Der Kulturüberstand wurde mit Hilfe von 0,2 μ m Filter von Feinteilen befreit und mit festem Ammonsulfat versetzt, daß eine 60 % Endkonzentration erreicht wurde.

Der durch Zentrifugation geklärte Überstand wurde auf eine mit 60 & Ammonsulfat äquilibrierte Phenylsuperose aufgetragen. Die Elution der SOD erfolgte mit etwas geringerer Ammonsulfatkonzentration. Die gesammelten Fraktionen wurden mit Aktivitätstest ELISA und RPC auf SOD-Gehalt und Reinheit geprüft. Die Reinigungsergebnisse sind in Tabelle 2 zusammengefaßt. Die Chromatogramme der RPC sind in Fig. 5 zusammengefaßt.

Tabelle 4: Reinigungsergebnisse der rh-SOD aus CHO-Zell20 kulturüberstand. Die SOD wurde mit Phenylsepharose aufgetrennt.

				rh-	SOD	
25		Volumen (ml)	Protein (mg)	Aktivität (mg)	ELISA (mg)	Ausbeute (%)
	Ammonsulfat Überstand	50	40	0,15	0,16	100
30	Eluat Phenylsuperose	4 ·	9	0,12	0,11	80

35 Eine weitgehende Anreicherung bezogen auf Protein und Volumen konnte durch die HIC erzielt werden.

- R. Hallewell; F. Masiarz, R. Najarian, J. Puma,
 M. Quiropa, A. Quiropa, A. Randalph, R. Sanchez Pescador,
 C. Scandella, B. Smith, K.Steiner and T. Mullenbach
 Human Cu/Zn superoxide dismutase cDNA; isolation of
 clones synthesising high levels of active or inactive
 enzames from an expression library.
- Nucleic Acid Research 13, 2017, 1985.
- J. Hartmann, T. Geller, Z. Youin, D. Bartfield,
 D. Kanner, H. Aviv and M.Gorecki
 Highlevel expression of enzymatically active human Cu/Zn
 superoxide dismutase in Escherichia coli
 Proc. Natl. Acad. Sci. 83, 7142, 1986
 - 3) L. Tibell, K. Hjalmarsson, T. Edlund, G. Skogman, A. Engström and S. Marklund
- Expression of human extracellular superoxid dismutase in Chinese hamster ovary cells and charakterization of the product

 Proc. Natl. Acad. Sci. 84, 6634, 1987
- 25 4) R. Hallewell, R. Mills, P. Tekamp-Olson, R. Blacker, S. Rosenberg, F. Ötting, F. Masiarz and C. Scandella Amino terminal acetylation of authentic human Cu/Zn superoxide dismutase producted in yeast Biotechnology 5, 363, 1987

30

5) M. Takahara, Sagai, S. Inoye and M. Iouye Secretion of human superoxide dismutase in Escherichia Coli. Biotechnology 6, 195, 1988.

35

6) T. Porstmann, R. Wietschke, H. Schmechta, R. Grunow, B. Porstmann, R. Bleiber, M. Pergande, S. Stachat and R. von Baehr

Rapid and sensitive enzyme immuno assay for Cu/Zn superoxide dismutase with polyclonal and monoclonal antibodies

Clinica Chimica Acta 171, 1-10; 1988

10

5

- 7) W. Melander and C. Harvath
 Salt Effects on hydrophobic Inteactions in
 Precipitation and Chromatography of Proteins: An
 Interpretation of the Lyotropic Series.
- Archives of Biochemistry and Biophysics 183,200-1977
 - 8) J.L. Ochoa

 Hydrophobic (Interaction) chromatography
 Biochemie, 60;1; 1978

20

9) K. Menander-Huber in Biological and clinical aspects of superoxide and superoxide dismutase ed W. Bannister and J. Bannister p. 408-423, Elsevier/North, 1980

25

- 10) U. Fincke, J. Schneider, E. Friderichs, H. Giertzard and L. Flohe
 Enhanced Myocardial Salvage by combined treatment with recombinant human superoxide dismutase in a canine coronary thrombosis model.

 Arzneimittelforschung 38, 138, 1988
 - L. M. Olson, G. Klintmalm, B. Husberg, J. Nery,
 C. Whitten, A. Paulsen and R. McClure
- Superoxide Dismutase improves organ preservation in liver Transplantation

 Proceedings 20, 961-964, 1988

12) C. Billiaderis, R. Weselake, A. Pethou and A. Friesens A colorimetric study of human Cu/Zn superoxide dismutase
Biochem.J. 248, 981-984, 1987

5

13) R. Weselake, S. Chesney, A. Pethou and A. Friesen Purification of human Copper, Zinc Superoxide Dismutase by Copper Chelate Chromatography Anal.Biochem. 155, 193-197, 1986

10

20

- 14) M. Miyota-Asano, K. Ito, H. Ikeda and S. Sekigucki Purification of copper-zinc-superoxide dismutase and catalase from human erythrocytes by copperchelate affinity chromatography
- 15 J.Chromat. 370, 501-507, 1986
 - 15) K. Arai, S. Izuka, A. Makita, K. Oikana and N. Tanigucki
 Purification of Cu/Zn superoxide dismutase from human erythrocytes by immuno affinity chromatography.

J.Immunol.Meth. 91, 139-143, 1986

PATENTANSPRÜCHE

5

30

35

- Verfahren zur Isolierung und Reinigung von Cu/Zn-Superoxiddismutase (Cu/Zn-SOD), dadurch gekennzeichnet, daß, gegebenenfalls nach entsprechender Vorreinigung, die Cu/Zn-SOD durch Hydrophobic Interaction Chromatographie (HIC) von Fremdproteinen getrennt wird.
- Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
 daß die durch HIC von Femdproteinen getrennte
 Cu/Zn-SOD mittels Metallchelatchromatographie oder
 Ionentauscherchromatographie nachgereinigt wird.
- Verfahren nach Anspruch oder dadurch gekennzeichnet,
 daß die Vorreinigung durch Fällung mittels Ammonsulfat oder einem äquivalenten Fällungssalz durchgeführt wird.
- Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß die HIC-Säule mit 40 60 %iger Ammonsulfatlösung äquilibriert wird und die Elution mittels eines Stufengradienten mit niedrigerer Ammonsulfatkonzentration durchgeführt wird.
- 5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
 dadurch gekennzeichnet, daß rekombinante SOD aus E. coli
 als Ausgangsmaterial verwendet wird.
 - 6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß rekombinante SOD aus Hefe als Ausgangsmaterial verwendet wird.
 - Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß SOD aus Erythrozytenzellen als Ausgangsmaterial verwendet wird.

8. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß als Ausgansmaterial durch transgene Tiere produzierte SOD verwendet wird.

9. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß native SOD aus Säugetierblut oder Säugetierzellen als Ausgangsmaterial eingesetzt wird.

5

- 10. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß rekombinante SOD aus Säugetierzellen als Ausgangsmaterial verwendet wird.
- 10 11. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daß rekombinante SOD aus Insektenzellen als Ausgangsmaterial verwendet wird.
- 12. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 und 4 bis 10,
 15 dadurch gekennzeichnet, daß für die HIC Phenylsepharose fast flow oder Phenylsepharose 4 B verwendet wird.
- 13. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 und 4 bis
 11, dadurch gekennzeichnet, daß für die HIC
 20 Phenylsuperose oder Alkylsuperose verwendet wird.
- 14. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 und 4 bis
 11, dadurch gekennzeichnet, daß die HIC ein
 Ligand, ausgewählt aus der Gruppe isopropyl, tertiär
 butyl, sec butyl, sec pentyl, isopentyl, cyclohexyl,
 Phenyl, Octyl, gebunden an einen Träger, ausgewählt
 der der Gruppe quervernetzte Agarose, Cellulose,
 Sepharose, Silica, Polyacrylamide, verwendet wird.


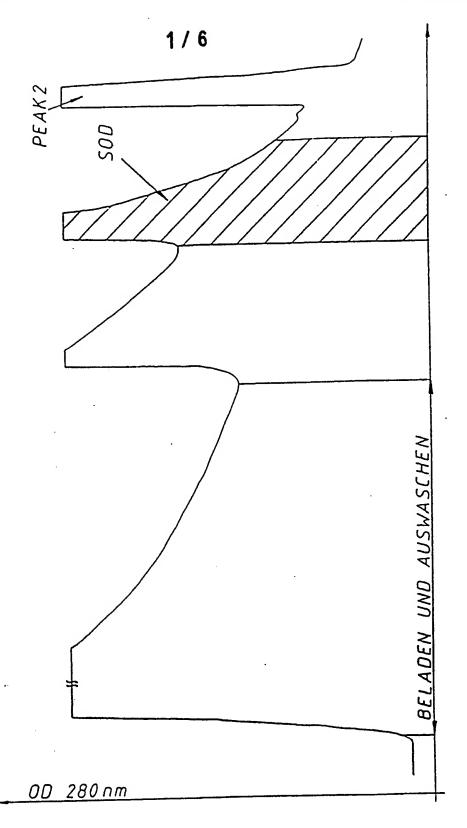



Fig. 1




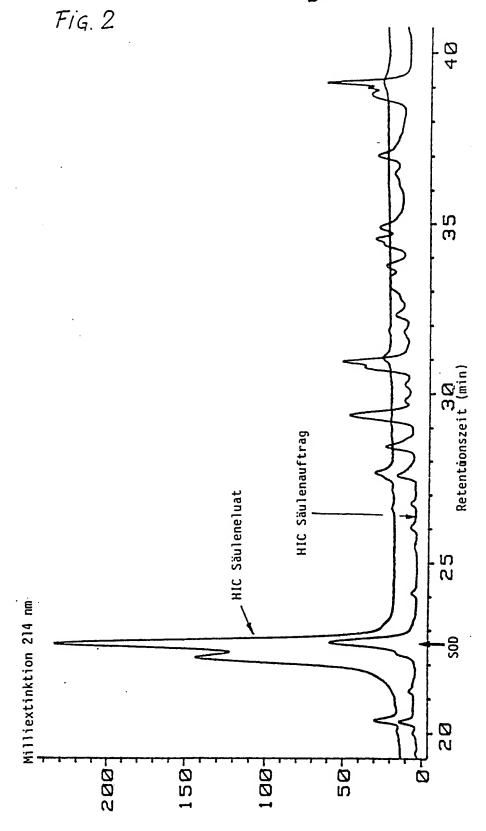



WO 90/05181 PCT/AT89/00099

3/6 FIG. 3

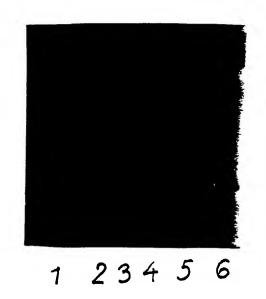

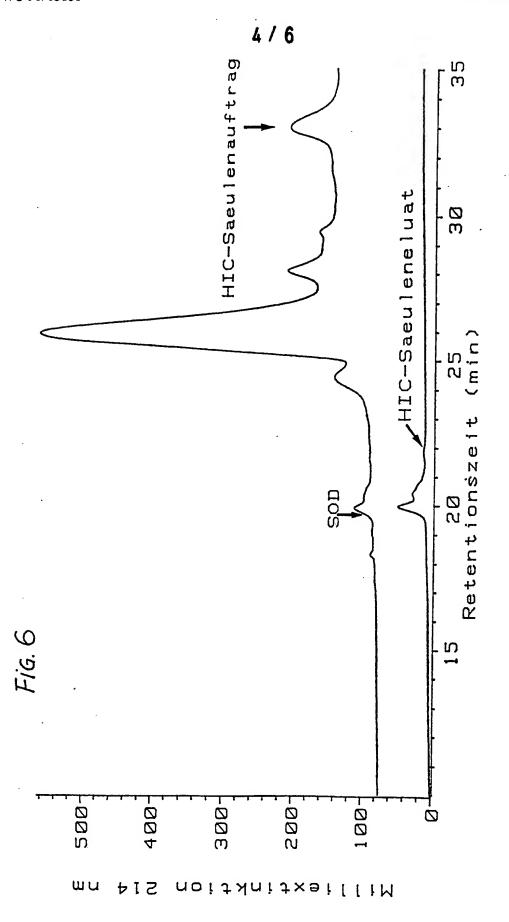

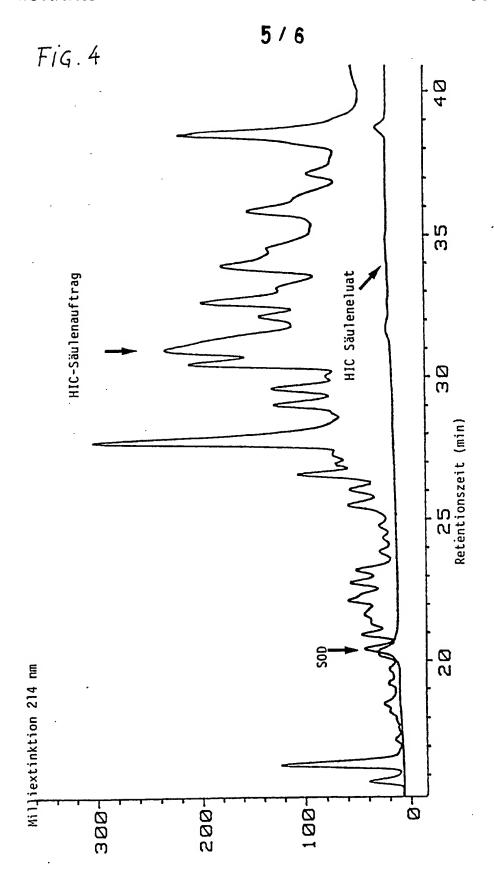

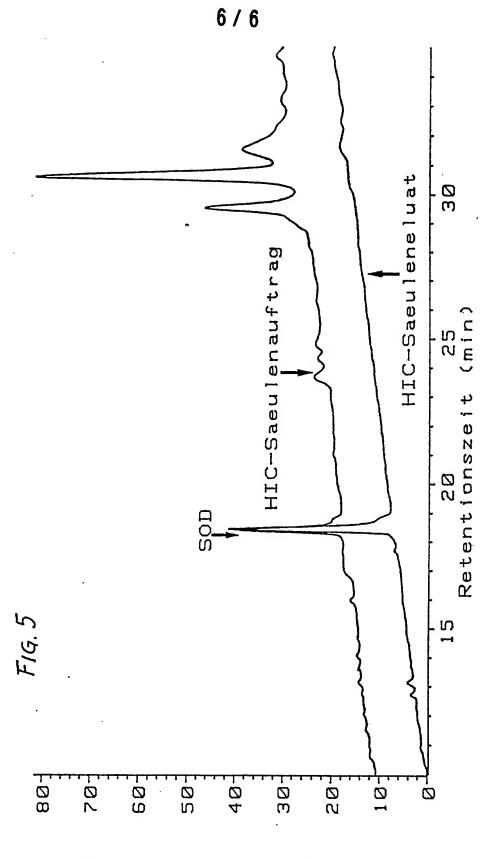

Milliextinktion 214 nm

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No PCT/AT89/00099

		ation symbols apply, indicate all) 4		
Int.Cl		onal Patent Classification (IPC) or to both Nation C12N 9/02	zi Classification and IPC	
IIIC.CI	• 5	C12N 3702		
II. FIELDS	SEARCI	4ED Minimum Documenta	nee Servehed ?	
Classification	n System		masification Symbols	
Ciassification	n System			
Int.Cl	.5	C12N		
		Documentation Searched other that to the Extent that such Documents at	n Minimum Documentation re included in the Fields Searched ⁶	
·				
III. DOCU	MENTS	CONSIDERED TO BE RELEVANT		Relevant to Claim No. 13
Category *		tion of Document, 11 with indication, where appro		Relevant to Claim No. 19
х	DD,	A1, 252615 (KARL-MARX-U 23 December 1987, see the whole document	JNIVERSITÄT)	1
Y				1-14
Y	віос	CHIMIE, Vol 60, 1978 J.I "HYDROPHOBIE (INTERACTI see page 1- page 15	L. Ochoa: ION) CHROMATOGRAPHY"	1-4
A	6			
A EP, A, 0038393 (DE FORENEDE BRYGGERIER A/S) 28 October 1981 see the whole document				7,9
P,X Dialog Information Services, File 351 World Patent Index 81-89, Dialog accession no. 89-319092/44, UBE Industries KK et al: "Prodm. of copper- zino type superoxidedismutase and catalase-by treating heamolysate by				1-4,7,9
"A" do co	cument de naidered to river document of date, cument we sich is cite ation or of cument re- ner means cument or	ibhshed prior to the international filing date but a priority date claimed	"T" later document published after to or priority date and not in conflicited to understand the principl invention. "X" document of particular relevant cannot be considered novel or involve an inventive step. "Y" document of particular relevant cannot be considered to involve document is combined with one ments, such combination being in the art. "A" document mamber of the same.	ct win the application but e or theory underlying the ce: the claimed invention cannot be considered to ce; the claimed invention an inventive step when the or more other such docu- obvious to a person akilled
Date of to	he Actual	Completion of the International Search	Date of Mailing of this International S	earch Report
1		ary 1990 (18.01.90)	12 February 1990 Signature of Authorized Officer	(12.02.90)
		Patent Office		

IX. DOCU	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT (CONTINUED FROM THE SECOND SHEET	n
Category *	Citation of Document, with Indication, where appropriate, of the resevent passages	Resevent to Claim No
	anionic ion exchange then by zino supporting metal chelating affinity chromatography to separate 2 components" JP 1235590, A, 890920, 8944 (BASIC)	,
	Dialog Information Services, File 351, World Patent Index 81-89, Dialog accession no. 86-207847/32, Nippon Kayaku KK: "New DNA to encode human super-oxidase dismutase - produced by culturing E coli transformed cDNA contg. plasmid obtd. using mRNA obtd. from human placenta" JP 61139390, A, 860626, 8632 (Basic)	5
	·	
	-	
1	-	

ANNEX TO THE INTERNATIONAL SEARCH REPORT ON INTERNATIONAL PATENT APPLICATION NO.

PCT/AT 89/00099

SA 32049

This annex lists the patent family members relating to the patent documents cited in the above-mentioned international search report. The members are as contained in the European Patent Office FDP file on 08/11/89. The European Patent Office is in no way liable for these particulars which are merely given for the purpose of information.

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(<)	Publication date
DD-A1- 252615	23/12/87	NONE	
EP-A1- 0019474	26/11/80	EP-A-B- 0019477 JP-A- 56035983 JP-A- 56035984 US-A- 4340675 US-A- 4388406 AI-E- 5976 AI-E- 6076 US-A- 4390628	26/11/80 08/04/81 08/04/81 20/07/81 14/06/81 15/02/84 15/02/84 28/06/81
EP-A1- 0038393	28/10/81	JP-A- 56148287 US-A- 4341867 AT-E- 6077	17/11/8: 27/07/8: 15/02/8

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen PCT/AT 89/00099

I. KLASSIFIKATION DES ANMELDUNGSGEGENSTANDS (bei mer	nreren Kiassifikationssymbolen sind alle al	nzugeben 6
Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPC) oder nach der nat	ionalen Klassifikation und der IPC 5	
: ⁵ C 12 N 9/02		
II. RECHERCHIERTE SACHGEBIETE		
Recherchierter Mind	estorufstoff"	
Klassifikationssvirem Kla	assifikationssymbole	
C 12 N		
februranierte nicht zum Mindestprufstoff geho "nter die recherchierten S	orenge Veroffentlichungen, soweit diese Sachgebiete fallen ⁸	
*		•
III. EINSCHLAGIGE VEROFFENTLICHUNGEN ⁹		
Ar** Kennzeichnung der Veröffentlichung 11, soweit erforderlich u	nter Angabe der maßgebrichen Teile 12	Betr. Anspruch Nr 13
X DD, A1, 252615 (KARL-MARX-UNIVERSITA 23 Dezember 1987,	ÄT)	1
siehe Dokument insgesamt		!
Υ		1-14
Y BIOCHIMIE, Band. 60, 1978 J.L. Ochoz (interaction) chromatography", sie Seite 1 - Seite 15	a: "Hydrophobie	1-4
A EP, A1, 0019474 (DE FORENEDE BRYGGEF 26 November 1980, siehe Dokument insgesamt	RIER A/S)	6
		!
* Besondere Kategorien on angegebenen Veröffentlichungen 10: "A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist "E" alteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist	T" Spatere Veroffentlichung, die nach di meldedatum oder dem Prioritatsdatun ist und mit der Anmeldung nicht koll Verständnis des der Erfindung zugr oder der ihr zugrundeliegenden Theori	n veroffentlicht worden idiert, sondern nur zum undeliegenden Prinzips
zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Verot- fentlichungsdafum einer anderen im Recherchenbericht ge- namten Veroffentlichung belegt werden soll oder die aus einem	K" Veröffentlichung von besonderer Bedi te Erfindung kann nicht als neu oder a keit beruhend betrachtet werden	auf erfinderischer Tatig-
anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt) "O" Veroffentlichung, die sich auf eine mundliche Offenbarung,	Y" Veröffentlichung von besonderer Bede te Erfindung kann nicht als auf erfir ruhend betrachtet werden, wenn die	nderischer Tatigkeit be- e Veroffentlichung mit
eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht "P" Veroffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldeda-	einer oder mehreren anderen Veröffer gorie in Verbindung gebracht wird un einen Fachmann nahellegend ist	
	&" Veröffentlichung, die Mitglied derselb	en Patentfamilie ist
IV. BESCHEINIGUNG		
Datum des Abschiusses der internationalen Recherche	Absendedatum des internationalen Reche	
18. Januar 1990	1 2 FEV. 19	
i :	Unterschrift des Devoltmachtigten Bedien	
Europäisches Patentamt	VIE	L. ROSSI

irt *	HLÄGIGE VERÖFFENTLICHUNGEN (Fortsetzung von Blatt 2) Kennzeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der maßgeblichen Teile	Betr. Anspruch Mr.
1	EP, A1, 0038393 (DE FORENEDE BRYGGERIER A/S) 28 Oktober 1981, siehe Dokument insgesamt	7-9
i	_ 	!
, x	Dialog Information Services, File 351, World Patent Index 81-89, Dialog accession no. 89-319092/44, UBE Industries KK et al: "Prodn. of copper-zino type superoxidedismutase and catalase - by treating heamolysate by anionic ion exchange then by zino supporting metal chelating affinity chromatography to separate 2 components", JP 1235590, A, 890920, 8944 (Basic)	1-4,7,9
A	Dialog Information Services, File 351, World Patent Index 81-89, Dialog accession no. 86-207847/32, Nippon Kayaku KK: "New DNA to encode human super-oxidase dismutase - produced by culturing E coli transformed cDNA contg. plasmid obtd. using mRNA obtd. from human placenta", JP 61139390, A, 860626, 8632 (Basic)	
ŀ	·	
	·	
,		
!		

ANHANG ZUM INTERNATIONALEN RECHERCHENBERICHT ÜBER DIE INTERNATIONALE PATENTANMFLDUNG NR.

PCT/AT 89/00099

32049

SA In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten internationalen Recherchenhericht angeluhrten

Patentdokumente angegeben.
Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Luropäischen Patentamts am 08/11/89
Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

im Recherchenhericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Nitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung
DD-A1- 252615	23/12/87	KEINE		- 100 mgs
EP-A1- 0019474	26/11/80	EP-A-B- JP-A- JP-A- US-A- US-A- AT-E- US-A-	0019477 56035983 56035984 4340675 4388406 5976 6076 4390628	26/11/80 08/04/81 08/04/81 20/07/82 14/06/83 15/02/84 15/02/84 28/06/83
EP-A1- 0038393	28/10/81	JP-A- US-A- AT-E-	56148287 4341867 6077	17/11/81 27/07/82 . 15/02/84

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

Č
☐ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
□ other:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.